


Aplicación, clasificación y datos eléctricos	
Aplicación	Almacenamiento de alto rendimiento de sangre y otros productos médicos y científicos
Volumen de almacenamiento	25.2 pies ³ (714 L) 504 bolsas de sangre
Rango de temperatura	+2 °C a +10 °C
Punto de ajuste	+4 °C
Potencia eléctrica	115V 60Hz 208-240V 50/60Hz
Corriente máxima	2.8A 1.55A
Clasificación de la alimentación de la instalación	Circuito derivado con puesta a tierra, que cumple con las clasificaciones del enchufe/cable así como con las normas eléctricas locales códigos y requisitos de seguridad 110-120V CA: 15 A (mínimo) 208-240V CA: 10 A (mínimo)
Longitud del enchufe/cable de alimentación	NEMA 5-15 de grado hospitalario 115V 60Hz, 10 ft (3.0m) Consulte sobre opciones adicionales de enchufe/cable
Certificación/registro de agencia	QPS (certificado según las normas UL y CSA) IEC/UL61010-2-011: 2016 IEC 61010-1:2010, AMD1:2016
Energy Star	Sí, refrigerador de alto rendimiento certificado ENERGY STAR®
Uso en interiores/exteriores	Solo para uso en interiores, no residencial
Entorno de aplicación	No corrosivo, no inflamable, no explosivo
Temperatura ambiente de funcionamiento	+15 °C a +32 °C +59 °F a +90 °F
Refrigeración	
Sistema de refrigeración	Basado en compresor VCC, hidrocarburo con aire forzado
Compresor	Hermético, velocidad variable (VCC). Rango de velocidad nominal: 1300-4000 rpm
Tipo de condensador	Aletado y tubular refrigerado por aire, sellado
Dispositivo de expansión	Tubo capilar
Tipo de evaporador	Expansión directa con aletado y tubular de aire forzado
Método de descongelación	Automático
Refrigerante	R600a, isobutano, conforme con EPA SNAP
Controlador / ajustes de configuración	
Interfaz de usuario	Pantalla digital LED, °C o °F
Interruptor de encendido	Encendido/Apagado
Tipo de controlador	Microprocesador con entrada por botones y pantalla LED
Seguridad	Puerta con cerradura
Sensor de control	NTC, sellado
Puertos de comunicación	Contactos de alarma remota
Alarma de fallo de alimentación	Sí
Alarmas de alta/baja temperatura	Sí, totalmente ajustables
Alarma de puerta abierta	Sí
Temperatura mín./máx.	Sí, visualización y restablecimiento
Registrador gráfico	Sí, integrado, 4 in (102 mm) de diámetro, gráficos sensibles a la presión sin tinta, respaldo batería
Lastre de monitoreo de temperatura	Sí, botella de 4 oz con tapa de rosca, lastre sólido opcional
Respaldo de batería	Sí, sistema de monitoreo de 9 hr Recargable de 12V, plomo-ácido


Características de rendimiento	
Uniformidad °C	+/-1.0
Recuperación a 8 °C después de 3 min de apertura de la puerta min	1
Estabilidad °C	0.07
Consumo de energía kWh/día	3.01
Emisión de ruido dB	49
Disipación / emisión de calor BTU/hr	915
Tiempo de descenso a 4 °C min	65

Todos los datos de rendimiento de un refrigerador de 25 pies³, 24.8°C ambiente, 4.0°C


Dimensiones y construcción	
Interior (an x al x pr)	24.8 x 58.1 x 30 in 628 x 1476 x 762 mm
Exterior (an x al x pr)	29.0 x 79.0 x 34.1 in 737 x 2006 x 866 mm
Exterior total (an x al x pr)	29.0 x 79.0 x 38.5 in 737 x 2006 x 977 mm
Aislamiento	Espuma sostenible, aprobada por la EPA de EE. UU. y SNAP
Acabado exterior/interior	Recubrimiento en polvo resistente a bacterias
Puerta	1, vidrio de doble panel, bisagra derecha
Puerto de acceso	Puerto de acceso superior- para sonda(s) de monitoreo externa(s) (0.75 in 19 mm de diámetro) Puerto de acceso izquierdo (1.75 in 45 mm de diámetro)
Almacenamiento interior (an x al x pr)	7 cajones, estancos, de acero inoxidable, ajustables, 21.5 x 3.9 x 26.7 in (546 x 100 x 679 mm), 100 lb 46 kg de capacidad máxima/cajón
Ruedas giratorias	Sí, giratorias con bloqueo
Peso neto	487 lb 221 kg
Peso de envío	549 lb 249 kg
Requisitos de espacio libre	Mínimo de 8 in (203 mm) por encima y 3 in (76 mm) detrás de la unidad para una ventilación adecuada, espacio libre y acceso a las funciones
Opciones Accesorios	Papel registrador, patas niveladoras, lastre sólido, alarmas remotas, kit de soporte para suelo y pared, anclaje sísmico, bandejas de almacenamiento, puerta con bisagra izquierda, puerta sólida, garantía extendida
Garantía	Lo indicado por el proveedor.

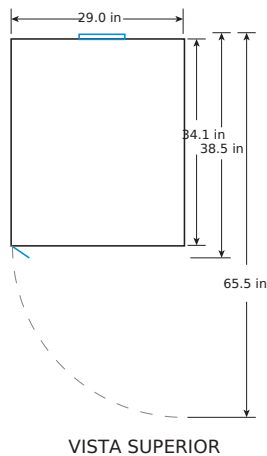


VISTA SUPERIOR

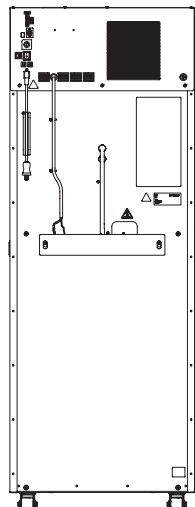

VISTA TRASERA

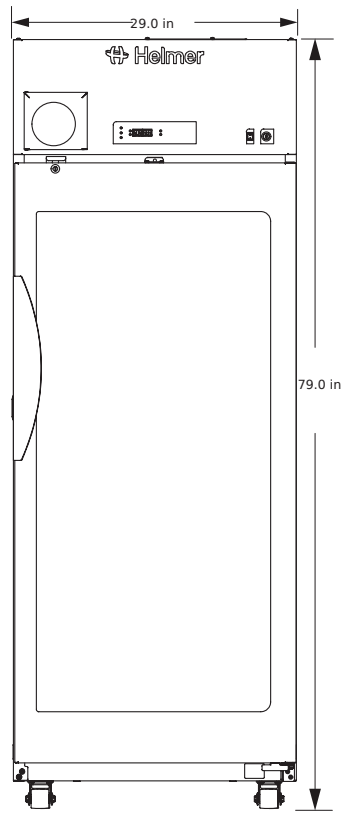

VISTA FRONTAL

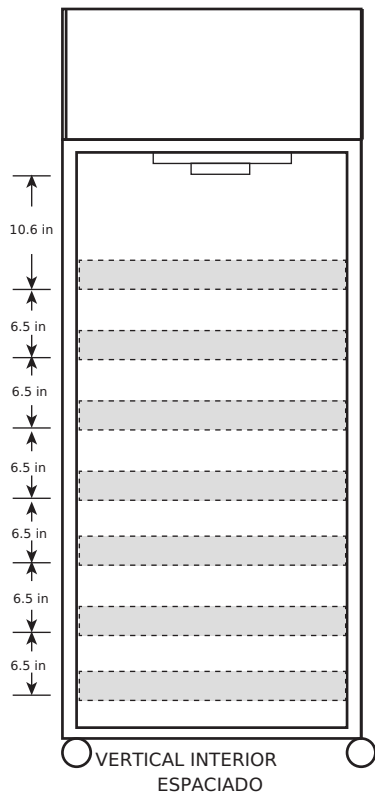

VERTICAL INTERIOR
ESPACIADO