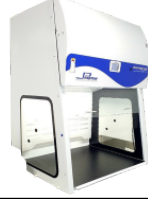




FORMATO FICHA TÉCNICA

Código:
FM-GC-012
Versión: 02
1/11/2022

GESTIÓN DE CALIDAD

EQUIPO	Cabina extractora de gases sin ducto	
MARCA	Jpinglobal	
ORIGEN	Colombia	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
		JPEGH-TOPA

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Diseñada para capturar, contener y expulsar cantidades de sustancias de emisión mínima o de baja toxicidad generadas por sustancias toxicas en el laboratorio. Aplicación: Protección al operador y ambiente en el laboratorio

DATOS TECNICOS	REFERENCIAS				
	JPCEGH61-AC	JPCEGH90PP-TOPA	JPCEGH120PP-TOPA	JPCEGH150PP-TOPA	JPCEGH180PP-TOPA
Dimensiones (cm)	(An. x Pr. x Al) Externas 61 x 70 x 112 cm / Internas 60 x 61 x 55-67 cm	(An. x Pr. x Al) Externas 90 x 75 x 123 cm / Internas 86 x 61 x 70 cm	(An. x Pr. x Al) Externas 120 x 75 x 123 cm / Internas 119 x 61 x 70 cm	(An. x Pr. x Al) Externas 150 x 75 x 123 cm / Internas 149 x 61 x 70 cm	(An. x Pr. x Al) Externas 180 x 75 x 123 cm / Internas 179 x 61 x 70 cm
Inclinación ergonómica	8° de inclinación				
Filtración	Filtro de carbon activado orgánico				
Velocidad de aire	0.5 +/- 0.1m/s.				
Materiales de construcción	Material externo: Recubrimiento inicial en Zinc (manejo de corrosión) y recubrimiento final Antimicrobiano con protección antiácidos Material interno: Estructura soldada de polipropileno blanco.				
Apertura máxima frontal	570 mm				
Vidrio frontal vertical	Ventana de seguridad certificada 5 mm tipo guillotina contrabalaceado con sistema de contrapeso posterior.				
Iluminación	Luz fluorescente blanca LED				
Seguridad	Clave de acceso de 4 dígitos				
Visualización	Pantalla touch a todo color 3.5"				
Alarmas	Audibles y visibles				
Nivel de ruido	<54 Decibeles				
Alimentacion electrónica	110V/60Hz				

ACCESORIOS

Manual operativo- técnico en Idioma español y certificación de fabrica bajo norma internacional

OPCIONALES

LAS SIGUIENTES OPCIONES APLICA PARA TODAS LAS REFERENCIAS: TPA-MS-60 - TPA-MS-90 - TPA-MS-120 - TPA-MS-150 - TPA-MS-180, Base soporte estructural con ruedas y frenos - Altura 75 cm Ancho 60 cm, MTG-TPA-60 - MTG-TPA-90 - MTG-TPA-120 - MTG-TPA-150 - MTG-TPA-180 Base tipo gabinete con 1 entrepaño y dos puertas, OPTPA-KSERV- OPTPA-KSERV - OPTPA-KSERV - OPTPA-KSERV - OPTPA-KSERV Grifo de agua, Grifo de gas y Poceta Ancho 180 cm (6 Pies), OP-TPA-01 (Ref 60), OP-TPA-02 (Ref 90 120) , OP-TPA-03 (Ref 150 180) Filtro de carbón activado (cambio filtros estándar orgánicos a filtros para ácidos), OP-TPA-01-AA (Ref 60), OP-TPA-02-AA (Ref 90 120) , OP-TPA-03-AA (Ref 150 180) Kit de filtro de carbón activado (cambio filtros estándar orgánicos a filtros para amoníaco y amina), OP-TPA-07 Medidor de flujo de aire por hilo caliente el cual registra la velocidad en la pantalla y cuenta con alarmas por pérdida de flujo o flujo excesivo. OP-TPA-08, Vidrio electrico manejado desde el panel (REF. 60 90 120), OP-TPA-09, Vidrio electrico manejado desde el panel (REF.150 180)

CONDICIONES

Garantía	1 año
-----------------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S