BPL
Ciencia y tecnología para la vida



CENTRON

SEPARADOR DE PLASMA

ES315


Hazlo facil

ES315 es un dispositivo electromecánico que permite una fácil separación de los componentes sanguíneos. Es un equipo semiautomático para separar la sangre en glóbulos rojos y plasma.

Características

- Funcionamiento sencillo y rápido
- Prensa semiautomática para la separación de plasma a partir de sangre total centrifugada
- Equipada con sensor óptico, unidad de pinzamiento y electrónica de control
- Permite un importante ahorro de mano de obra
- Con los separadores de plasma mecánicos convencionales, los operadores deben vigilar continuamente los tubos para detener la transferencia de plasma y evitar que los glóbulos rojos pasen a la bolsa de plasma. Sin embargo, este dispositivo libera a los operadores de la necesidad de una vigilancia constante y del esfuerzo manual, ya que pinza automáticamente el tubo cuando aparecen los primeros glóbulos rojos al finalizar la transferencia de plasma. Un solo operador puede gestionar entre 10 y 20 unidades.
- La sensibilidad de detección de glóbulos rojos (RBC) es ajustable por el usuario
- Emite alarmas sonoras y visuales
- Ofrece buena reproducibilidad y facilidad de uso

Parte superior y de control

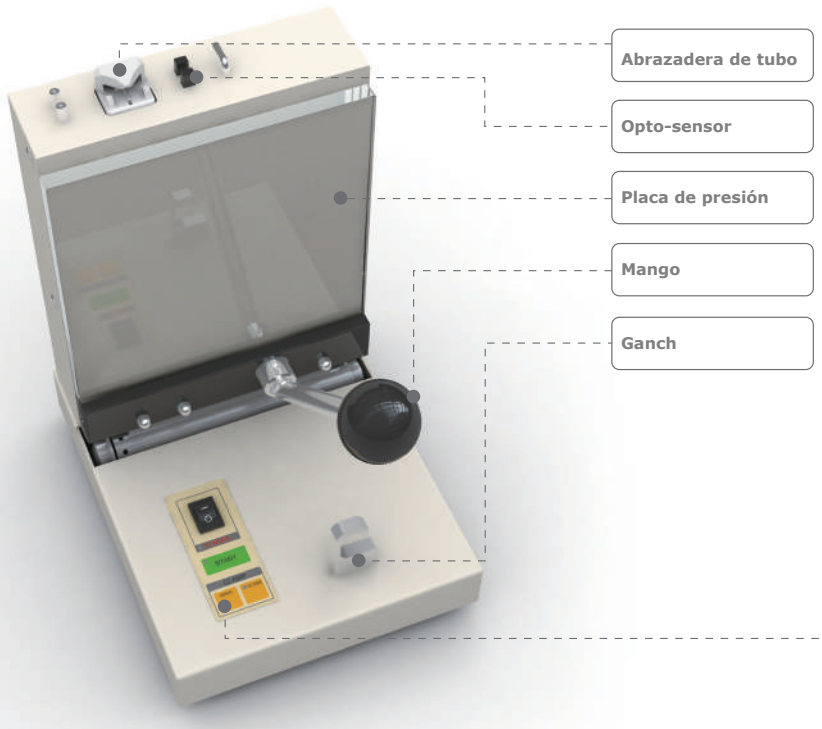





Panel de control

Conectar múltiples unidades

• En la mayoría de los bancos de sangre, se utilizan varias unidades de separador de plasma juntas. Cada separador debe usar un adaptador de corriente, por lo que los usuarios deben preparar el mismo número de tomas de pared o adaptadores múltiple. Para reducir la cantidad de enchufes de CA que deben prepararse, hasta cinco unidades de separadores pueden alimentarse con un único adaptador de corriente mediante cables de puente.

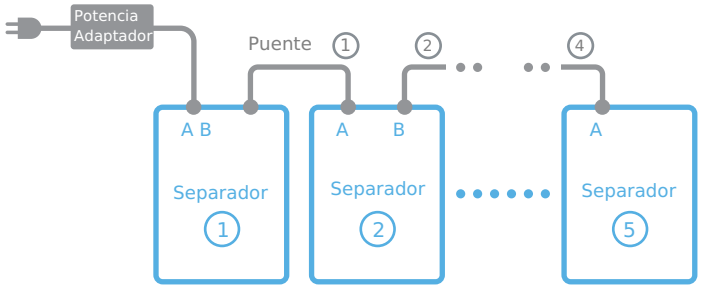

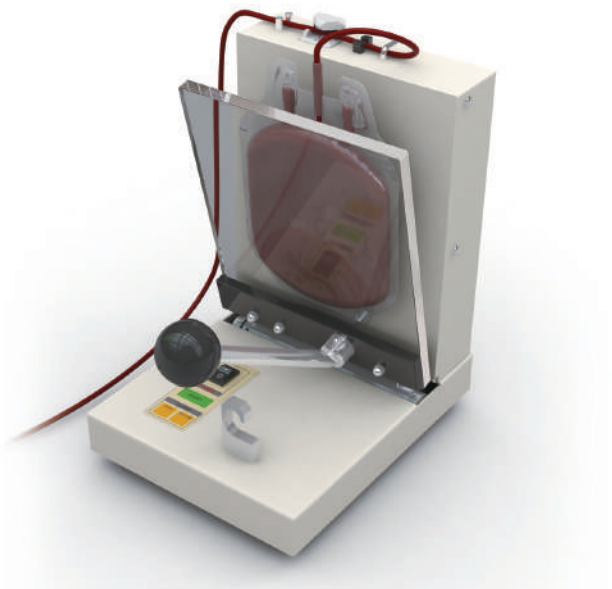

Especificación

Producto	SEPARADOR DE PLASMA
Modelo	ES315
Potencia	18V ⎓ 1A + ⊙ −
Adaptador	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Dimensión	240(W)mm/165(L)mm/230(H)mm

Información

CE

DISTRIBUIDOR

BPL
Ciencia y tecnología para la vida

Centron Corporation

Dirección: 44 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang, Gyeonggi-do,
Código Postal 14059 / República de Corea
Teléfono: +82-31-422-7890 / Fax: +82-31-422-7866
Correo: info@centrons.com
Sitio web: www.centrons.com

※Las especificaciones y el diseño pueden cambiar sin previo aviso para mejoras del producto.

1510