El estándar global para mezclador automatizado de recolección de sangre



CENTRON

AccuMix™ CM735A

MEZCLADOR PARA RECOLECCION DE SANGRE

Caracteristicas

- Sujeta automáticamente el tubo de la bolsa de sangre cuando el volumen de sangre recolectado alcanza el volumen preestablecido. El volumen objetivo puede ser seleccionado por el usuario.
- Realiza un movimiento oscilante para mezclar la sangre recolectada con el anticoagulante contenido en la bolsa.
- La pantalla LCD muestra el volumen de sangre recolectado, el volumen programado para recolectar, el peso total de la sangre y las bolsas, el tiempo transcurrido de la donación y los símbolos de alarma.
- Emite alarmas visuales y sonoras al finalizar la recolección, cuando existe un flujo anormal de sangre o cuando la batería está baja.
- Bandeja de gran capacidad. Permite utilizar hasta cuatro bolsas de sangre (sistema cuádruple).
- Realiza automáticamente la función de tara del peso de las bolsas para medir el volumen neto de sangre recolectada.
- El módulo de pinzamiento (clamp) es desmontable y puede instalarse tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho del equipo.
- Equipo completamente portátil gracias a su batería recargable y reemplazable.
- Incluye un cargador integrado y un cargador externo independiente.
- Incluye un bolso de transporte de lona (canvas).
- Diseño liviano, funcionamiento mediante batería y bolso de transporte, lo que lo convierte en un equipo muy práctico para campañas móviles de donación de sangre.

Centron

Smart Solutions for Smarter Bloodbanking

Modulo de pinzamiento intercambiable

- El módulo de pinzamiento sujeta el tubo de la bolsa de sangre cuando el volumen de sangre recolectado alcanza el valor preestablecido seleccionado por el usuario. Además, el módulo de pinzamiento es desmontable, por lo que puede instalarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho del equipo para mayor comodidad del usuario




Panel control



La simplicial refinada se une a la robustez

- Solo conectelo a la alimentacion electrica, enciendalo y estara listo para usar.
- Pensando en el flujo de trabajo y las necesidades del usuario, el CM735 cuenta con una interfaz intuitiva y menús de configuración fáciles de seguir.
- El confiable sistema de pesaje y mezcla del CM735 está protegido por una estructura de ingeniería robusta, diseñada para ofrecer mayor resistencia a los impactos y una larga vida útil. Su diseño compacto, basado en una distribución optimizada del peso, hace del CM735 un equipo ideal para cualquier entorno de trabajo.

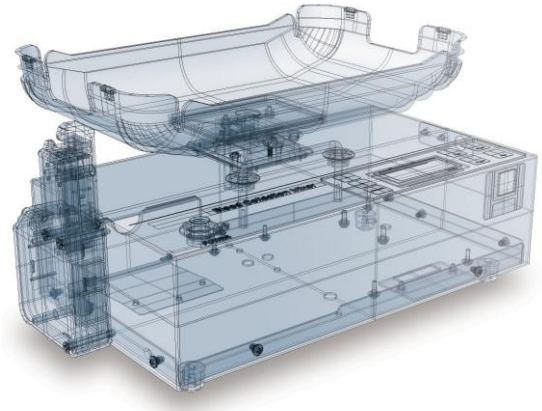

Bateria y cargador de bateria

- El CM735 puede alimentarse mediante un paquete de baterías o un adaptador de corriente CA (AC). Utiliza una batería recargable y reemplazable de níquel-cadmio (Ni-Cd) de 12 V y 2 Ah de capacidad. Cuando el voltaje de la batería alcanza su límite mínimo, el equipo emite una alarma sonora. La batería puede recargarse tanto mientras está instalada en el mezclador como mediante un cargador de batería independiente.

Paquete de baterias reemplazable





Cargador integrador y unidad de carga indepenpendiente

Especificaciones

Producto	Mezclador para recoleccion de sangre
Modelo	CM735A
Alimentacion	18V⎓ 1.0A+ ⊖⊙⊕
Adapatador	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Dimensiones	203(W)mm/292(L)mm/140(H)mm

Informacion

CE UL FDA registered

DISTRIUIDOR

BPL Ciencia y tecnología para la vida

Centron Corporacion

Direccion: 44 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang, Gyeonggi-do, Postal Code 14059 / Republic of Korea
Telefono: +82-31-422-7890 / **Fax**: +82-31-422-7866
Correo: info@centrons.com
Sitio web: www.centrons.com

※The specification and design are subject to change without prior notice for product upgrades.1510