

CENTRON


BALANZA CENTRIFUGA

CB220

Características


- Ingeniería eficaz
  - Dos sensores de peso independientes y mostrando la diferencia de peso
- Cómo usar :
  - Los operadores ponen dos cubos (con bolsas de sangre en cada cubo) en ambas placas.
  - La pantalla muestra la diferencia de peso y una lámpara indicadora en el lado más ligero se enciende.
  - Los operadores sólo añaden unos pocos chips de peso (p. ej. 1 gramo cada uno) en la cubeta hasta que se enciende la lámpara 'GOOD'. La lámpara se enciende cuando la diferencia de peso es menor que la tolerancia.
- Preciso, simple y muy fácil de usar para el procedimiento de procesamiento de sangre

Panel frontal

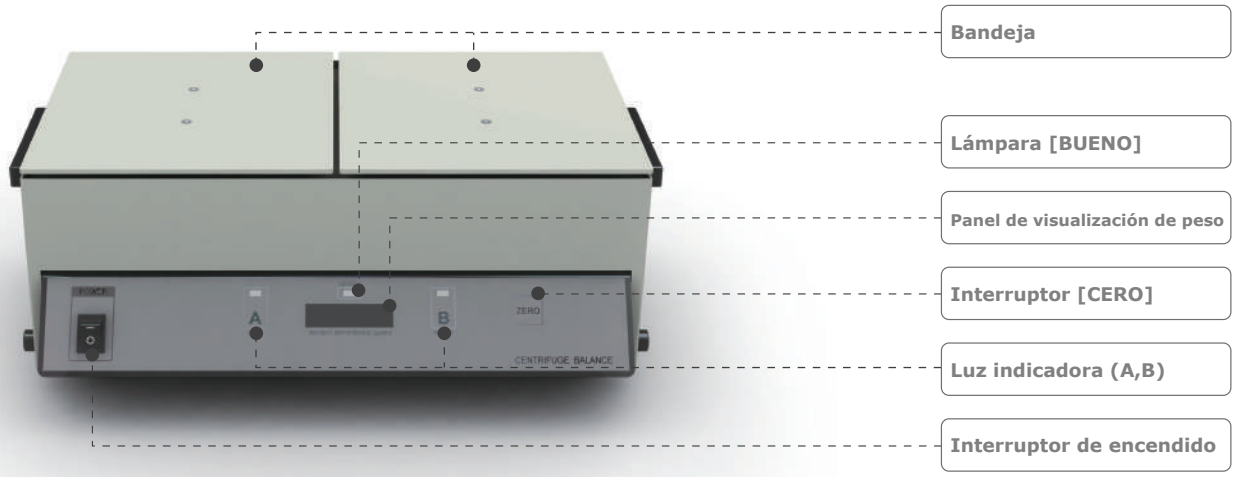

Para qué sirve

- Este dispositivo es una «balanza diferencial» electrónica diseñada específicamente para un uso particular en bancos de sangre. Mide dos pesos de forma independiente e indica cuánto más ligero es un lado con respecto al otro.
- Este sencillo dispositivo hace que el proceso de equilibrado de pesos sea muy simple, preciso y rápido. Resultará ideal para proteger valiosas centrífugas y ahorrar mano de obra.

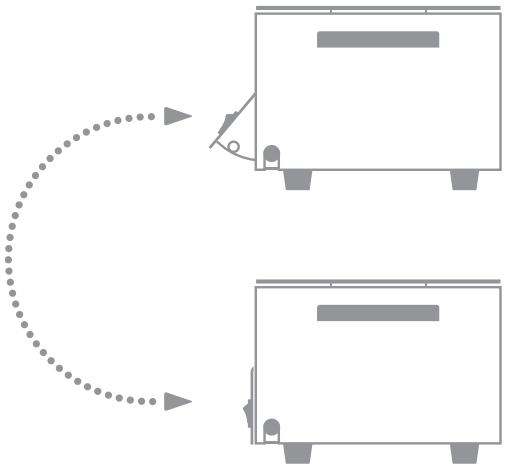



∗El lado B es más ligero por 4 gramos. Añadir algunos chips de peso en B hará que se encienda la lámpara GOOD.

Especificación

Producto	BALANZA CENTRIFUGA
Modelo	CB220
Energía	18V ⎓ 1A +⊙−
Adaptador	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Dimensión	330(W)mm/180(L)mm/130(H)mm

Información

DISTRIBUIDOR

BPL
Ciencia y tecnología para la vida

Centron Corporation
Dirección: 44 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang, Gyeonggi-do,
Código postal 14059 / República de Corea
Teléfono: +82-31-422-7890 / Fax: +82-31-422-7866
Correo: info@centrons.com
Sitio web: www.centrons.com

※La especificación y el diseño pueden cambiar sin previo aviso para mejoras del producto.

1510